



smartdent
CLEVER QUALITY

2025

think smart

Alles was gut ist. Für Praxis und Patient.

Abformung

smartBite blackberry Bissregistrierung	4
smartBite bubble gum Bissregistrierung	4
smartBite cola Bissregistrierung	4
smartBite crystal clear Bissregistrierung	4
smartBite Bissregistrierung	5
smartBite grey Bissregistrierung	5
smartBite speed Bissregistrierung	5
Alginat blau	6
Alginat bubble gum	6
Alginat cola	7
Alginat strawberry	7
smartcolor Alginat	7

Reinigung/Desinfektion/Sterilisation

smartWash Handwaschlotion	8
smarthand Liquid Händedesinfektion	8
smarthand gel Flasche Händedesinfektionsgel	8
smart Desinfektionstücher getränkt	9
smartwipes wet Desinfektionstücher	9
smartwipes Desinfektionstücher	10
smartwipes wet&easy Flowpack Desinfektionstücher	10
smartwipes alkoholfrei Desinfektionstücher	11
smartwipes Dry Desinfektionstücher	11
smartzid Flächendesinfektion	12
smartbiozid alkoholfreie Flächendesinfektion	12
smartsept IMP Abdruckdesinfektion	13
smart Instrumentendesinfektion	14
smartdrill Bohrerbad	15
smartfol Sterilisationsfolie	15

Geräte & Zubehör

smartsonic Ultraschallgerät	16
smart Ultraschalltest	17
smartsonic Ultraschallreinigungsflüssigkeit	17

Mehrwegartikel

Absaugkanülen	18
---------------------	----

Einwegartikel

Speichelsauger	18
Applikatoren	19
Einwegpinsel	19
Mischkanülen	20
Intraoral tips	20
Wattekügelchen	21
Zahnwatterollen	21
Mulltupfer unsteril	21
Serviettenhalter	22
smartbibs Patientenservietten	23
Nasskreppservietten	24
Einmalhandtücher	24, 25
Patientenumhänge	26
Kopfschutztaschen	27
Mundspülbecher	28, 29
Mundspülbecher Hartpapier	30
smartmask Mundschutz	31
Nitrilhandschuhe	32, 33, 34, 35
smart nature gloves Nitrilhandschuhe	34
smart Lady Pearl Nitrilhandschuhe	34
Latexhandschuhe	35

Füllungstherapie

smartCeram Füllungsmaterial	36
smartCeram flow Füllungsmaterial	36
smartCite All in One Bonding	37
smartic Artikulationspapier	37

Hilfsmittel/Labor

Okklusionsspray	38
Löffelmaterial	38

Medikamente

Coolpack	39
Kältespray	39
Injektionskanülen	40

Medikamente/Instrumente

Zylinderampullenspritze	40
-------------------------------	----

Instrumente

Mundspiegel	41
Mundspiegelgriffe	41
Serviettenhalter	22

Endodontie

Endodontieinstrumente manuell	42, 43
-------------------------------------	--------

Prophylaxe

smart orasplash Mundspülung	44
smart cocosfresh Erfrischungstücher	45
smart eco brush Zahnbürsten	45
Minibrush Prophylaxebürsten	46
smart profipolish Prophylaxepaste	46
smartpearls plus Prophylaxepulver	46
smartpearls Prophylaxepulver	47
smartgun perio Prophylaxegerät	48
smartgun one Prophylaxegerät	49
smartcase Schienendosen	50





Pckg. 2x 50 ml
21,70

SMARTBITE BLACKBERRY

Mit Brombeerrgeschmack. Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistern. Gute Fräsbarkeit aufgrund hoher Endhärte. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die Bissregistrate sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit 1,5 Min. Endhärte Shore A85.

126461 2 x 50 ml inkl.
12 Mischkanülen **21,70**



Pckg. 2x 50 ml
21,70

SMARTBITE BUBBLE GUM

Mit einem angenehmen Bubble Gum Geschmack. Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistern. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Endhärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrate sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit 1 Minute und 30 Sekunden. Endhärte Shore A85, Farbe rosa.

219276 2 x 50 ml inkl.
12 Mischkanülen **21,70**

SMART MIXINGTIPS
finden Sie auf Seite 20



Pckg. 2x 50 ml
21,70

SMARTBITE COLA

Mit Cola-Geschmack. Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistern. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Endhärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrate sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit 1 Minute und 30 Sekunden. Endhärte Shore A85, Farbe braun.

219277 2 x 50 ml inkl.
12 Mischkanülen **21,70**



Pckg. 2x 50 ml
26,50

SMARTBITE CRYSTAL CLEAR

Das smartBite crystal clear ist ein transparentes, additionsvernetztes Polyvinylsiloxan. Der Name ist Programm! Das smartBite crystal clear ist kristallklar und erfüllt alle Ansprüche an ein hochwertiges Bissregistriermaterial mit einer Shore A70. Das Material ist schwer fließend und hat einen angenehmen Pfefferminzgeschmack.

217601 2 x 50 ml inkl.
12 Mischkanülen **26,50**



SMARTBITE

Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistrator. Gute Fräsbarkeit aufgrund hoher Endhärte. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die Bissregistrator sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit 1,5 Min. Endhärte Shore A85.

111365 2 x 50 ml inkl.
12 Mischkanülen **21,70**



SMARTBITE GREY

Mit Pfefferminzgeschmack. Zur Herstellung von dauerhaft, mehrfach verwendbaren Bissregistrator. Das Material zeichnet sich durch seine gute Fräsbarkeit aufgrund der hohen Endhärte aus. Durch ein ausgeprägtes thixotropes Verhalten ist ein einfaches Applizieren durch automatische Sicherheitskartuschensysteme möglich. Die hohe Standfestigkeit verhindert ein Einfließen in die Interdentalräume und ermöglicht eine leichte Mundentnahme. Die erstellten Bissregistrator sind dauerhaft dimensionsstabil. Gesamtabbindezeit: 1 – 1,3 Minuten. Endhärte: Shore D43.

127661 2 x 50 ml inkl.
12 Mischkanülen **24,99**

SMART MIXINGTIPS
finden Sie auf Seite 20



SMARTBITE SPEED

Das smartBite speed ist ein schnellhärtendes, additionsvernetztes Vinylpolysiloxan mit einer Gesamtabbindezeit von 1 Minute. smartBite speed hat einen angenehmen Himbeergeschmack, die Farbe ist entsprechend auch Himbeer-rot. smartBite speed ist schwerfließend mit einer Shore A85 und erfüllt alle Ansprüche an ein hochwertiges Bissregistriermaterial.

211500 2 x 50 ml inkl.
12 Mischkanülen **22,90**



Beutel 450 g
7,50



SMART ALGINAT BLAU

Schnellhärtendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse. Es ist besonders cremig und lässt sich blasenfrei Anmischen. Durch die satte blaue Farbe hat es eine exzellente Lesbarkeit der Konturen und ist zu 100 Stunden formstabil. Mit Pfefferminzgeschmack.

111364 Flachbeutel 450 g **7,50**


Beutel 450 g
7,50



SMART ALGINAT BUBBLE GUM

Normalhärtendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse. Es ist besonders cremig und lässt sich blasenfrei Anmischen. Das Alginat bubble gum hat eine exzellente Lesbarkeit der Konturen und ist bis zu 100 Stunden formstabil. Mit bubble gum-Geschmack. Farbe pink.

219272 Flachbeutel 450 g **7,50**

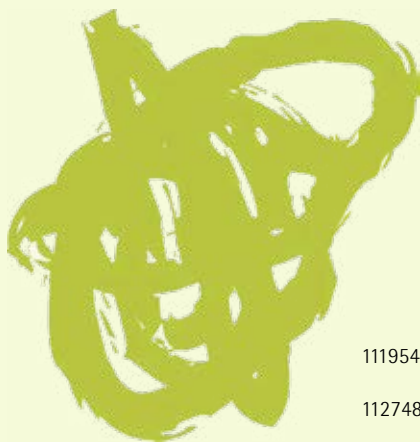

111954 Alginatbox, leer
Ø 40 mm, H 165 mm **3,90**
112748 Messbesteck **0,69**

Stück
3,90



Messbesteck
0,69



Beutel 450 g
7,50



SMART ALGINAT COLA

Schnellhärtendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse. Es ist besonders cremig und lässt sich blasenfrei anmischen. Das Alginat cola hat eine exzellente Lesbarkeit der Konturen und ist bis zu 100 Stunden formstabil. Mit Cola-Geschmack. Farbe braun.

219271 Flachbeutel 450 g **7,50**

Stück
7,50



SMART ALGINAT STRAWBERRY

Schnellhärtendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse. Es ist besonders cremig und lässt sich blasenfrei Anmischen. Das Alginat strawberry hat eine exzellente Lesbarkeit der Konturen und ist bis zu 100 Stunden formstabil. Mit Erdbeer-Geschmack. Farbe rosa.

219270 Flachbeutel 450 g **7,50**

Beutel 450 g
7,50



SMARTCOLOR ALGINAT MANGO

Schnellhärtendes, staubfreies Alginat der Spitzenklasse mit Farbindikator. Der Farbindikator wechselt von orange/rot zu gelb. Das smartcolor ist besonders cremig und lässt sich blasenfrei Anmischen und ist bis zu 100 Stunden formstabil. Mit Mango-Geschmack.

219273 Flachbeutel 450 g **7,50**



SMARTWASH HANDWASHLOTION

smartWash ist eine milde Waschlotion zur Hand- und Hautreinigung mit einem angenehmen, frischen Duft. Sie sorgt für eine Tiefenreinigung, fördert eine gesunde, glatte Haut und ist besonders für eine empfindliche Haut, entsprechend für die tägliche Anwendung, geeignet (neutraler pH-Wert von 5,5). Die 500 ml und 1 Liter Flaschen sind für Eurospender geeignet.

212037 Flasche 500 ml	2,49
212038 Flasche 1 l	4,90
212039 Kanister 5 l	12,90



SMARTHAND LIQUID

Das smarhand liquid ist eine alkoholhaltige, antiseptische Lösung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Sie wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und ist begrenzt viruzid. smarhand liquid hygienische Desinfektion (EN 1500), durch Verreiben der Lösung (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 60 Sekunden. Außerdem erfüllt das smarhand liquid die Anforderungen einer chirurgischen Desinfektion (EN 12791) durch Verreiben von 3ml Liquid mit der erforderlichen Einwirkzeit von 1,5 Minuten. Vorgang wiederholen.

BAuA-Nr.: N-98578, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

210494 Flasche 100 ml	1,90
210495 Flasche 500 ml	4,90
212496 Flasche 1 l	6,90
210497 Kanister 5 l	29,90



SMARTHAND GEL

Alkoholhaltiges, antiseptisches Gel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid. Dermatologisch getestet. Hygienische Desinfektion (EN 1500): Durch Verreiben des Gels (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 30 Sekunden. Chirurgische Desinfektion (EN 12791): Durch Verreiben des Gels (3 ml) mit der erforderlichen Einwirkzeit von 2,5 Minuten. Vorgang wiederholen.

BAuA-Nr.: N-92293, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

208250 Flasche 100 ml	2,79
208251 Flasche 500 ml	6,59
208252 Flasche 1 l	9,95
208253 Kanister 5 l	37,50



Beutel 100 Tücher
17,40

SMART DESINFEKTIONSTÜCHER

Alkoholische Feuchttücher zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten sowie zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Flüssigkeit ist VAH-gelistet. 100 Tücher, Format 12 x 20cm. Wirkungsspektrum (Tränkflüssigkeit): Bakterien und Candida albicans nach EN13727, EN 13624 und EN 13697 (hohe Belastung) TbB (Tuberkulose)-

Inaktivierung (M.terrae) nach EN 14348 (hohe Belastung), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/ HIV/HCV) gemäß DW/2012. Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: Konz.: 1 Minute*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute*, Begrenzt viruzid Plus. Einwirkzeiten (bezogen auf die getränkten Tücher) Bakterien und Candida albicans (VAH, und EN 16615, hohe Belastung): 2 Minuten *(kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Minuten).

BAuA-Nr.: N-76869, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

111358 Beutel 100 Tücher **2,39**
213877 Dose 100 Tücher **3,99**

SMARTWIPES WET

smartwipes Wet eignen sich hervorragend für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, z.B. Behandlungsstühle, Schwebetische, Handstücke etc. zwischen dem Patientenwechsel. Zeitersparnis durch Ready-to-Use Lösung. Hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung). Die Tuchqualität ist besonders weich, fusseltfrei und reißfest. Aus 100% PES hergestellt. Hohe Abgabeleistung der Tränkflüssigkeit auf die zu desinfizierende Oberfläche. Gute Materialverträglichkeit. smartwipes Wet wirken bakterizid (einschließlich MRSA) und levurozid (EN 13727/13624).

Erfolgreich getestet im 4-Feldertest in 1 Minute nach EN 16615. Tuberkulozide Wirkung (M. terrae) wird in 1 Minute nach EN 14348 erreicht. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/ H1N1-Viren entsprechend EN 14476 in 30 Sekunden. Begrenzt viruzid Plus. Tränkflüssigkeit smartid ist VAH gelistet. Ohne Aldehyde und Phenole. *Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste 5 Minuten. Tuchgröße: 28x30 cm. Gewicht: 50g/qm. Inhalt: 100 Tücher je Beutel. In den Varianten neutral, lemon, tropic, ocean, bubble gum sowie in mango und cocos erhältlich.

125220 Beutel 100 Tücher neutral **17,40**
203461 Beutel 100 Tücher bubble gum **17,40**
219423 Beutel 100 Tücher cocos **17,40**
203458 Beutel 100 Tücher lemon **17,40**
219263 Beutel 100 Tücher mango **17,40**
203459 Beutel 100 Tücher ocean **17,40**
203460 Beutel 100 Tücher tropic **17,40**
125221 Leereimer **3,80**

Dose 100 Tücher
3,99



Beutel 100 Tücher
2,39



Leereimer
3,80





Packung 30 Tücher

5,19



SMARTWIPES WET & EASY

Vorgetränkte XL Tücher (25 x 30 cm) für die Wischdesinfektion. Im praktischen und platzsparenden flow pack mit 30 Tüchern. Erfolgreich getestet im 4-Felder Test. Tuberkulozide nach EN14348. Noro-Viren entsprechend EN14478. Wirksam nach 1 Minute.* Die Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet. *Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste 5 Minuten.

214375 Packung 30 Tücher 5,19

Beutel 100 Tücher

2,49



SMARTWIPES

Getränkte, alkoholhaltige Desinfektionstücher im Format 14 x 20 cm. Flüssigkeit ist VAH gelistet.

Wirkungsspektrum:
Begrenzt viruzid. Wirkt bakterizid (einschließlich MRSA), levurozid (EN 13727/13624) und inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren (EN 14476) in 1 Minute (begrenzt viruzid). Erfolgreich getestet im 4-Felder Test in 1 Minute (EN 16615). Tuberkulozide Wirkung (M.terrae) in 5 Minuten (EN 14348)

* Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste 5 Minuten.

214377 Beutel 100 Tücher bubble gum 2,49

214376 Beutel 100 Tücher lemon 2,49





Beutel 100 Tücher

2,39



SMARTWIPES ALKOHOLFREI

Alkoholfreie Feuchttücher zur schnellen Desinfektion im dental-medizinischen Bereich. Sie eignen sich hervorragend für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholsensiblen Oberflächen von Medizinprodukten. Wirkungsspektrum: Bakterizid (einschließlich MRSA) und levurozid (EN 13727/13624). Erfolgreich getestet im 4-Feldertest in 1 Minute nach EN 16615. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren (EN 14476) in 1 Min.* Tränkflüssigkeit smartBiozid (VAH-gelistet). Ohne Aldehyde und Phenole. Format 14 x 20 cm.* Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste 5 Minuten.

210161 Beutel 100 Tücher
210162 Leerdose

2,39
1,50

Beutel 90 Tücher

14,50



SMARTWIPES WET ALKOHOLFREI

smartwipes wet alkoholfrei eignen sich hervorragend für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholsensiblen Oberflächen von Medizinprodukten, z. B. Kunst- und Lederbezüge von Behandlungsstühlen, Schwebetische, Handstücke etc. zwischen dem Patientenwechsel. Zeitersparnis durch Ready-to-Use Lösung. Hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung). Die Tuchqualität ist besonders weich, fusselfrei und reißfest. Aus 100 % PES hergestellt. Hohe Abgabeleistung der Tränkflüssigkeit auf die zu desinfizierende Oberfläche. Gute Materialverträglichkeit. Gewicht: 50g/qm. Format 28 x 30 cm. smartwipes wet alkoholfrei wirken bakterizid

(einschließlich MRSA) und levurozid (EN 13727/13624). Erfolgreich getestet im 4-Feldertest in 1 Minute nach EN 16615. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren (EN 14476) in 1 Min.* Tränkflüssigkeit smartBiozid (VAH-gelistet). Ohne Aldehyde und Phenole.

* Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste 5 Minuten.

208200 Beutel 90 Tücher 14,50
125221 Leereimer 3,80


SMARTWIPES DRY

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (z.B. smartzid Flächendesinfektion). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien, gelochten Vlies mit einem Flächengewicht von 40 g/m² im Format 305 x 280 mm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.

111959 Karton 6 x 100 Tücher 31,90
111958 Spenderbox leer 5,15


Karton 6 x 100 Tücher

31,90

Spenderbox leer

5,15

SMARTZID FLÄCHENDESINFEKTION

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion für den ärztlichen und zahnärztlichen Bereich zur Desinfektion von Medizinprodukten wie Hand- und Winkelstücke und kleinen Flächen. Wirkt bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid (EN13727/13624), tuberkulozid (EN14348) (hohe Belastung): 1 Min*.

Begrenzt viruzid plus (wirksam gegen über behüllten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV, H1N1, BVDV, Vaccinia, Adeno, Noro) entsprechend EN14476: 30 Sec.*
*kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Minuten.

203456 Sprühflasche 1 l	
bubble gum	12,90
203457 Kanister 10 l	
bubble gum	29,90
203449 Sprühflasche 1 l	
lemon	12,90
203450 Kanister 10 l	
lemon	29,90
111360 Sprühflasche 1 l	
neutral	12,90
111359 Kanister 10 l	
neutral	29,90
203452 Sprühflasche 1 l	
ocean	12,90
203453 Kanister 10 l	
ocean	29,90
203454 Sprühflasche 1 l	
tropic	12,90
203455 Kanister 10 l	
tropic	29,90



Sprühflasche 1 l
12,90



Kanister 10 l
29,90



Kanister 10 l
29,90



Flasche 1 l
9,90

SMARTBIOZID

Alkoholfreie Sprüh- und Wischdesinfektion für das medizinische Inventar, Kunst- und Lederbezüge. Durch den kombinierten Einsatz von verschiedenen Quats wird ein breites mikrobizides Wirkungsspektrum bei gleichzeitig ausgezeichneten Kurzzeitwerten erzielt. smartBiozid wirkt bakterizid (einschließlich MRSA) und levurozid (EN 13727 / 13624) in 1 Minute* und ist VAH gelistet. Begrenzt viruzid. Inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in nur 1 Min.*

Ohne Alkohole und Aerosole. Ohne Zusatz von Farb- und Duftstoffen.

*kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Minuten.

208198 Flasche 1 l	9,90
208199 Kanister 10 l	29,90



Kanister 10 l

35,90



SMARTSEPT IMP ABDRUCKDESINFEKTION

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Abdruckdesinfektion für dentale Abformmaterialien wie z.B. A / C-Silikonen, Polyether, Alginaten, Hydrokolloiden. Das smartsept IMP ist anzuwenden als Tauchdesinfektion, ist zudem phenolfrei und verhält sich farbneutral.

Ultraschallbad geeignet. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten:
Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung): Konz. 5min. Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung): Konz. 5min. „Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) nach EN 14476 und EN 17111 (niedrige Belastung): Konz. 5min. TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung): Konz. 15min.

214668 Kanister 10 l

35,90



Kanister 10 l

69,90

ideal verwendbar
mit dem smartSonic
Ultraschallgerät
siehe Seite 16



SMART INSTRUMENTEN- DESINFEKTION

Hochleistungskonzentrat der neuen Generation zur Desinfektion und Reinigung von Instrumenten wirkt bakterizid und fungizid in 15 Minuten in 2 %iger Gebrauchslösung und in 30 Minuten in 1 %iger Gebrauchslösung getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 01.09.2001) unter hoher organischer Belastung und gelistet bei der VAH vollständige Virusinaktivierung (HBV, HCV, HIV, Papova, Vaccinia, Adeno, Polio) wird in 3 %iger Gebrauchslösung in 15 Minuten erreicht. Auch wirksam gegenüber BVDV/ Rota/ und Noro-Viren. Frei von Aldehyden und Phenolen. Geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad in 5 Minuten in 3 %iger Gebrauchslösung. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Vollviruzid!

111362 Dosierflasche 1 l

12,90

111361 Kanister 10 l

69,90

SMART INSTRUMENTE

finden Sie auf
*Seite 40
und 41*



smartSonic
ULTRASCHALL-
REINIGUNGSFLÜSSIG-
KEIT finden Sie
auf Seite 17





Kanister 10 l

28,49



Flasche 2 l

7,95



SMARTDRILL BOHRERBAD

Medizinprodukt für die hochwirksame, gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungslösung von Bohrern und rotierende Instrumente aller Art. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Frei von Aldehyden und Phenolen. Wirkt bakterizid (einschließlich MRSA), levurozid (EN 13727/EN 13624). Getestet nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, Stand: 02.04.2015) unter hoher organischer Belastung. Gelistet bei der VAH mit Kurzzeitwerten von 15 Minuten. Wirkt tuberkulozid (M. terrae) nach EN 14348 in 30 Minuten unter hoher organischer Belastung. Vollständige Virusinaktivierung (HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia/HPV/Adeno/Polio) wird in 15 Minuten auch gegenüber Rota- und Noro-Viren unter hoher organischer Belastung nach EN 14476 erreicht. Wirksam im Ultraschallbad in 5 Minuten. Nicht proteinfixierend. Die Gebrauchslösung ist biologisch abbaubar.

123299 Flasche 2 l

7,95

123300 Kanister 10 l

28,49

ideal verwendbar
mit dem smartSonic
Ultraschallgerät
siehe Seite 16



Rolle 200 m ab

12,90

SMARTFOL STERILISATIONSFOLIE

Einmal-Sterilisationsfolie. Für Dampf- und Gassterilisation mit Indikator.
Rolle mit 200 m

111351 Rolle 200 m, 100 mm 21,90

111349 Rolle 200 m, 50 mm 12,90

111350 Rolle 200 m, 75 mm 16,50



SMARTSONIC MED 30 ULTRASCHALLGERÄT

- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz)
- 5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- eco-Modus: Schonende Reinigung bei leiserm Betrieb, indem der sweep-modus bei etwas geringerer Intensität ausgeführt wird
- sweep-Modus: Gleichmäßige Reinigung durch gleichmäßige Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
- pulse-Modus: Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen durch pulsierende Schallfeldverteilung
- dynamic-Modus: Kombination der Ultraschallmodi sweep und pulse zur Erhöhung der Gesamtreinigungsleistung
- degas-Modus: Schnelle Entgasung der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Anwendungen im Labor-Bereich
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar
- Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung
- Einstellbare Grenztemperatur von 40-60 °C (umschaltbar in °F)
- Digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände
- Optische und akustische Rückmeldungen, z.B. bei Reinigungsende oder Erreichen der Grenztemperatur
- Vorwahl der Reinigungszeit: Reinigungsdauer zwischen 1 Minute und 6 Stunden einstellbar
- Elektronische Temperaturregelung in Schritten zu 5 °C einstellbar

- von 25-80 °C (umschaltbar in °F; Temperaturtoleranz -5/+8 °C)
- Setup-Menü zur individuellen Anpassung der Gerätefunktionen
- Trockenlaufsicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 8 Stunden
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungswanne aus Edelstahl
- 2 Jahr Gewährleistung ab Erstinbetriebnahme

Lieferumfang:

- Deckel / Abtropfschale
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge)

212244 Stück

599,00

detaillierte Informationen zu smartSonic finden Sie hier



Stück

599,-

212248 Edelstahlkorb MED 30

Innenmaße (mm):

255/115/75, Stück

44,50

214222 Deckel MED 30

Außenmaße B/T/H (mm):

305/190/20, Stück

19,90



212246 Einsatzdeckel MED 30

für 2 Gläser, Außenmaße

B/T/H (mm): 270/170/15,

Lochdurchmesser 95 mm

Stück

34,90

212252 Reinigungsglas mit Deckel

600 ml, Durchmesser

90 mm, Stück



14,90

216387 Gummiring für

Reinigungsglas

Stück

2,12

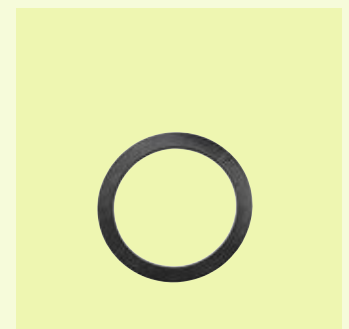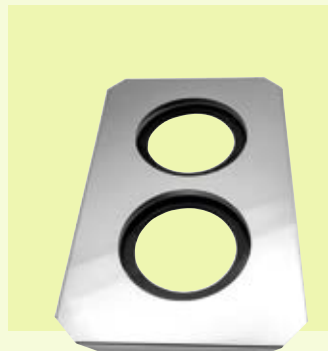

212255 Tauchkorb Edelstahl

Außenmaße B/H (mm):

75/140, Innendurchmesser

55 mm, Stück

42,90

212254 Tauchkorb Kunststoff

Außenmaße B/H (mm):

90/180, Innendurchmesser

40 mm, Stück

14,30

212251 Reinigungsbecher weiß,

Außenmaße B/T/H (mm)

95/90/55, Durchmesser

75 mm, Stück

5,70


212250 Reinigungsbecher blau,

Außenmaße B/T/H (mm)

95/90/55, Durchmesser

75 mm, Stück

5,70

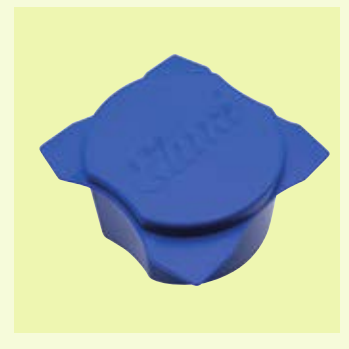



212249 Kunststoffwanne
mit Deckel, Stück **46,50**



214212 Zapfhahn für 5 l
EC10, EC35, EC60
Stück **9,90**



214213 Dosierbecher EC10, EC35, EC60
250 ml, Stück **4,90**



212253 Schraubdose PP, transparent,
625 ml, Stück **8,30**



SMARTSONIC MED CLEAN EC10

smartSonic MED clean EC 10 ist ein flüssiges, alkalisches Universalreinigungskonzentrat zur gründlichen Ultraschall- und Tauchreinigung von alkalibeständigen Reinigungsgütern und Medizinprodukten wie z.B. Labor-, medizinische, zahnärztliche und zahntechnische Instrumente, Kronen, Abdrucklöffel u.a. aus Edelstahl, Stahl, Keramik, Glas, Kunststoff und Gummi. smartSonic MED clean EC 10 entfernt Blut, Speichel, Proteine, Gewebe- und Knochenreste sowie Fette, Öle, Schleif- und Polierpasten. Nicht geeignet für Aluminium, Zink bzw. Leichtmetall-Legierungen sowie alkaliempfindliche und spannungsrissegefährdete Kunststoffe wie z.B. ABS und PC.

Dosierung: 5%, bei starker Verschmutzung bis zu 10%, T = 50-80°C (frisches Blut & Protein: T < 42°C), 4-10 min im Ultraschall. Gereinigte Teile unter fließend Wasser abspülen.

212256 Kanister 5 l **72,90**

SMART ULTRASCHALLTEST

Der Folientest ist eine gängige und sehr preiswerte Möglichkeit zur Überprüfung der Ultraschall- bzw. Kavitationsleistung im Ultraschallbad. Die spezielle Aluminiumfolie (30µ) ist angepasst auf die Dimensionen des Testrahmens. Die zugeschnittene Folie wird im Rahmen platziert. Anschließend wird der befüllte Rahmen entsprechend im Ultraschallbad positioniert. Nach dem Reinigungsvorgang wird die Folie sichtbar angegriffen sein. Die so entstandenen Folienbilder bieten eine Beurteilungsgrundlage für die Ultraschallleistung bzw. -verteilung im Ultraschallbad. Der Test sollte wöchentlich durchgeführt werden.

SMARTSONIC MED CLEAN EC35

smartSonic MED clean EC 35 ist ein flüssiges, schwach saures Reinigungskonzentrat zur täglichen Ultraschallreinigung von Zahnprothesen aus Metall, Keramik und Kunststoff. Organische Verunreinigungen und Ablagerungen sowie Essensreste werden unter Ultraschalleinwirkung entfernt. Der bei der Reinigung freierwerdende Aktivsauerstoff frischt die Prothese hygienisch auf.

Dosierung: 2% in Wasser. Anwendung im Ultraschall: 3 min. Reinigungslösung täglich frisch ansetzen. Nach der Reinigung die Prothese gründlich mit Wasser abspülen. Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

212257 Kanister 5 l **61,90**

SMARTSONIC MED CLEAN EC60

smartSonic MED clean EC 60 ist ein flüssiges, saures Reinigungskonzentrat zur Ultraschall- und Tauchreinigung. Geeignet zur sauren Grundreinigung von medizinischen Instrumenten, Implantaten, Prothesen und Werkstücken aus Edelstahl, Metall, Keramik, Glas und Kunststoff. Auch zur Entfernung säurelöslicher Zemente geeignet. Mit Ultraschall besonders geeignet zur Entfernung von Verunreinigungen an unzugänglichen Stellen wie z.B. Winkel, Kanten, und Gelenken. Ebenso geeignet für Laborgeräte.

Dosierung: Ultraschall 1-10%; Tauchbad: ~20%; 40-70°C; 1-5min. Nach Reinigung Teile spülen & trocknen.

212258 Kanister 5 l **86,90**

216189 Packung 50 Testfolien **7,90**
216188 Set 1 Prüfkörper plus
30 Testfolien **11,90**



Set
11,90

Packung 50 Folien
7,90



Beutel 100 Stück

2,59

SMART SPEICHEL-SAUGER

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Mit abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm. Beutel mit 100 Stück.

111202 grün	2,59
111201 blau	2,59
117492 lila	2,59
117503 pink	2,59
203514 anthrazit	2,59
117514 orange	2,59
111200 transparent	2,59



Packung 10 Stück

6,79



SMART ABSAUGKANÜLEN

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav (max. 134° C). Nicht mit Edelstahlkontakt in den Autoklav einbringen. Packung 10 Stück.

117491 lila	6,79
117502 pink	6,79
111219 grün	6,79
203509 schwarz	6,79
111218 blau	6,79
117513 orange	6,79
111217 weiß	6,79



Dose 100 Stück

2,29



APPLIKATOREN

Micropinsel mit Fasern beflockt.
Nicht absorbierend. Zum Auftragen
von dentalmedizinischen Lösungen
(applizieren). Dispenserdose mit
100 Stück.

111357 grün, regular	2,29
111356 blau, regular	2,29
111355 gelb, regular	2,29
117484 rot,fein	2,29
117505 pink, fein	2,29
117516 lila, ultrafein	2,29
117522 helllila, ultrafein	2,29



Beutel 100 Stück

2,59

EINWEGPINSEL

Nylonhaarpinsel zum bequemen
Applizieren von Flüssigkeiten und Gels.
Im wiederverschließbaren Klarsicht-
beutel mit je 100 Stück.

①111353 kurz, fein, transparent, schwarz	2,59
②111352 mittel, transparent, schwarz	2,59
③111354 weich, transparent, weiß	2,59



SMART MIXINGTIPS T

Durch ein speziell entwickeltes Mischverfahren und dem kompakten Design mit verkürzter Geometrie sorgt der T-Mischer bis zu 40 % weniger Materialabfall im Vergleich zu den bewährten Helical-Mischkanülen. Also eine perfekte Alternative! Beutel mit 50 Stück.



- ① 217178 braun 1:1, **29,90**
- ② 217176 blau 1:1, **30,90**
- ③ 217173 gelb 1:1, **30,90**
- ④ 217174 rosa 1:1, **30,90**
- ⑤ 217175 grün 1:1, **30,90**
- ⑥ 217177 blau 4:1, 10:1, **32,90**
- ⑦ 219268 mintgrün 1:1, mit Applikationsspitze **36,90**



SMART INTRAORALTIPS

Applikationstips für die smart Mixingtips T. Erhältlich in den Farben gelb und transparent. Packung mit 100 Stück

- 217654 gelb, **11,90**
- 217655 transparent, **11,90**



SMART FÜLLUNGSMATERIAL
finden Sie auf
Seite 37



Packung 100 Stück

11,90



Dose 4 bzw. 10 g
8,90



SMART WATTEKÜGELCHEN

Die smart Wattekügelchen aus Baumwolle sind saugstark, sehr weich und formbeständig. Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Arzneimitteln. Chlorfrei.

Größe 00 = Ø 4 mm

Größe 0 = Ø 4,8 mm

Größe 1 = Ø 6,3 mm

Größe 2 = Ø 7,6 mm

218676 Größe 00 Dose 4 g	8,90
218677 Größe 0 Dose 4 g	8,90
218678 Größe 1 Dose 10 g	8,90
218679 Größe 2 Dose 10 g	8,90

SMART ZAHNWATTEROLLEN

Einmal-Zahnwatterollen aus reiner Baumwollwatte. Hochsaugfähig und fusselfrei.

111177 Größe 1 Packung 300 g	3,90
111178 Größe 2 Packung 300 g	3,90
111179 Größe 3 Packung 300 g	3,90

Packung 300 g

3,90



SMART MULLTUPFER

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100 % Baumwolle), die Tupfer sind unsteril verpackt und dienen zur allgemeinen Wundversorgung. Vor Anwendung müssen die Mulltupfer mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

203203 Packung 500 Stück Erdbeere	9,90
203205 Packung 500 Stück Haselnuss	10,90
203208 Packung 500 Stück Pflaume	21,90
203207 Packung 500 Stück Walnuss	13,90



SMART SERVIETTENHALTER

Autoklavierbarer Serviettenhalter aus hochelastischem Kunststoff mit Metallklammern. Hoher Tragekomfort für den Patienten. Länge 48 cm.

117494	Serviettenhalter	Stück, pink	3,99
111951	Serviettenhalter	Stück, weiß	3,99
111950	Serviettenhalter	Stück, blau	3,99
111952	Serviettenhalter	Stück, grün	3,99
111953	Serviettenhalter	Stück, lila	3,99



Karton 500 Stück

18,90**SMARTBIBS PATIENTENSERVETTEN**

Patientenschutzserviette aus zwei Lagen Papiervlies sowie einer Lage Polyethylen. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyethylen-Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Format 33 x 45 cm.

- 211436 Karton 500 Stück, blau **18,90**
- 211433 Karton 500 Stück, gelb **18,90**
- 211439 Karton 500 Stück, grau **18,90**
- 211434 Karton 500 Stück, grün **18,90**
- 211431 Karton 500 Stück, lila **18,90**
- 211437 Karton 500 Stück, pink **18,90**
- 211435 Karton 500 Stück, weiß **18,90**
- 211440 Karton 500 Stück, magenta **18,90**
- 211432 Karton 500 Stück, orange **18,90**
- 211441 Karton 500 Stück, peach **18,90**
- 211438 Karton 500 Stück, schwarz **18,90**
- 211443 Karton 500 Stück, weinrot **18,90**



Packung 250 Stück

3,99**SMART NORMTRAYEINLAGEN**

Filterpapier für Normtray.
Hochnassfester Krepp 55 g/m².

- 111211 Packung 250 Blätter 28 x 18 cm, blau **3,99**
- 111212 Packung 250 Blätter 28 x 18 cm, grün **3,99**
- 117495 Packung 250 Blätter 28 x 18 cm, lila **3,99**
- 117517 Packung 250 Blätter 28 x 18 cm, orange **3,99**
- 117506 Packung 250 Blätter 28 x 18 cm, pink **3,99**
- 111210 Packung 250 Blätter 28 x 18 cm, weiß **3,99**



Karton 3990 Tücher
37,90

SMART PAPIERHANDTÜCHER V-FALZ

Die weißgrauen Einmal-Falorthandtücher haben ein V-Falz, sind zweilagig und haben ein Format von 24 x 23 cm.

207221 Karton 3990 Tücher **37,90**



Karton 1000 Stück
29,80

SMART NASSKREPPSERVIETTEN

Zum Verpacken von Abdrücken und Modellen. Höchste Festigkeit und Saugkraft. Extremer Dehnfaktor.

88200 Karton 1000 Stück
weiß **29,80**



SMART PAPIERHANDTÜCHER C-FALZ

Die mikrogeprägten, weißen Einmalhandtücher aus Zellstoff sind 2-lagig und haben ein C-Falz. In einem Karton befinden sich 20 komplett eingepackte Bundles mit je 144 Blatt, welche eine hygienische Lagerung ermöglichen.
Format 23 x 32 cm, Format gefalzt
23 x 9,5 cm, Format Bundle
23 x 9,5 x 11 cm (L x B x H).

219274 Karton 2880 Tücher **41,90**

Karton 4000 Tücher

33,90



SMART ECO TOWELS

Die smart eco towels sind 2-lagige Einmalhandtücher aus recyceltem Papier. Die 20 einzeln, eingepackten Bundles zu je 200 Blatt ermöglichen eine hygienische Lagerung in Ihrem Praxisalltag. V-Falz, Format 24 x 20,5 cm, Farbe braun.

211490 Packung 4000 Tücher **33,90**



SMART PATIENTENUMHÄNGE

Einmalpatientenumhänge aus dünner PE-Folie mit saugfähiger Zellstoffauflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Format 54 x 60 cm.

218696 Rolle 80 Umhänge, apricot	7,59
218693 Rolle 80 Umhänge, dunkelblau	7,59
218695 Rolle 80 Umhänge, gelb	7,59
218700 Rolle 80 Umhänge, grau	7,59
111129 Rolle 80 Umhänge, grün	7,59
111128 Rolle 80 Umhänge, hellblau	7,59
218694 Rolle 80 Umhänge, lila	7,59
218698 Rolle 80 Umhänge, limette	7,59
218697 Rolle 80 Umhänge, rosa	7,59
218701 Rolle 80 Umhänge, schwarz	7,59
218699 Rolle 80 Umhänge, weinrot	7,59
111127 Rolle 80 Umhänge, weiß	7,59





SMART KOPFSCHUTZTASCHEN

Kopfschutztaschen aus Zellstoff
und PE Folie. Verwendbarkeit nach
Hersteller:

25 x 25 cm: KaVo, Sirona, Morita,
Castellili, Adec, Ultradent.

25 x 33 cm: KaVo, Sirona, Castellili,
Adec.

201126 Karton 500 Stück 25 x 25 cm, blau	21,90
201127 Karton 500 Stück 25 x 25 cm, grün	21,90
201129 Karton 500 Stück 25 x 25 cm, lila	21,90
201130 Karton 500 Stück 25 x 25 cm, orange	21,90
201131 Karton 500 Stück 25 x 25 cm, rosa	21,90
201128 Karton 500 Stück 25 x 25 cm, weiß	21,90

201132 Karton 500 Stück 25 x 33 cm, blau	24,90
201133 Karton 500 Stück 25 x 33 cm, grün	24,90
201135 Karton 500 Stück 25 x 33 cm, lila	24,90
201136 Karton 500 Stück 25 x 33 cm, orange	24,90
201137 Karton 500 Stück 25 x 33 cm, rosa	24,90
201134 Karton 500 Stück 25 x 33 cm, weiß	24,90

Karton 500 Stück ab
21,90





Karton 3000 Stück

58,90



SMART MUNDSPÜLBECHER

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. 100 % recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar. Karton 3000 Stück.

111208 blau	58,90
111209 grün	58,90
117490 lila	58,90
117512 orange	58,90
203511 pink	58,90
117501 rosa	58,90
203510 schwarz	58,90
111207 weiß	58,90





SMART MUNDSPÜLBECHER FLOWER

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. 100 % recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar. Karton 1.500 Stück.

203512 grün/grün	41,90
203513 rosa/pink	41,90





Karton 1000 Stück
32,90



SMART MUNDSPÜLBECHER HARTPAPIER

Die Mundspülbecher aus Hartpapier haben eine Innenbeschichtung aus PE und eine Grammatur von 190 g/m². Das Fassungsvermögen beträgt 180 ml. Die Becher sind in den Farben weiß, grün, dunkelblau, hellblau, gelb, orange, rosa und berry verfügbar. Karton 1.000 Stück.

215347 berry	32,90
201240 dunkelblau	32,90
215346 gelb	32,90
208916 grün	32,90
215348 hellblau	32,90
215344 orange	32,90
215345 rosa	32,90
201239 weiß	32,90

SMART NATURE CUPS

Die smart nature cups sind biologisch abbaubare Hartpapierbecher mit einer PLA-Beschichtung. Die Becher haben eine Grammatur von 190 g/m². Das Fassungsvermögen beträgt 180 ml. Oberer Durchmesser ca. 7 cm. Farbe: Hellbeige.

215349 Packung 1000 Stück **48,50**



Packung 1000 Stück
48,50



Packung 50 Stück

3,29



SMARTMASK MUNDSCHUTZ

Mundschutz 3-lagig. Latexfrei. Aus weichem Vliesstoff und glasfaserfreiem Filtermedium. Elastikbänder/Ohrschlaufen mit hoher Elastizität. Eingearbeiteter Nasenbügel. Filterleistung über 98 % (Melt Blown Filter). Optimale Passform. Sehr angenehmer Komfort, auch bei längerer Tragedauer. Typ II R. Packung 50 Stück.

111214 blau	3,29
209520 cedro	3,29
209519 gelb	3,29
111215 grün	3,29
117489 lila	3,29
117511 orange	3,29
117500 pink	3,29
111213 weiß	3,29

SMARTMASK PLUS MUNDSCHUTZ

Der neue smartmask Plus ist ein 4-lagiger Einmal-Mundschutz mit Elastikband. Er besticht durch seine Qualität und Passform. smartmask Plus hat ein glasfaserfreies Filtermedium und ist latex- und nickelfrei. Bakterielle Filterleistung $\geq 98\%$, entspricht der EN14683: 2019+AC:2019, Typ IIR. Packung 50 Stück.

216353 weinrot	3,49
216354 schwarz	3,49
216355 grau	3,49
216356 türkis	3,49



Packung 50 Stück

3,49





Packung 100 Stück

4,90



NITRILHANDSCHUHE SOFT

Der smartdent Nitril ist ein super sensibler Handschuh in modischen Farben. smartdent Nitril hat einen exzellenten Tragekomfort durch hervorragende Passform. Der smartdent Nitril ist extra dünn und gefühlsecht, weich, geschmeidig und leicht an- und auszuziehen. Die mikrotextrierten Fingerspitzen gewährleisten ein extra feines Tastempfinden und einen sicheren Halt. Hergestellt nach EN 455. EN 374. AQL 1,5. Puderfrei.

①



②



③



⑨



⑩



⑪





① GELB 208476 Größe XS 4,90 208477 Größe S 4,90 208478 Größe M 4,90 208480 Größe L 4,90	⑤ LILA 117488 Größe XS 4,90 117487 Größe S 4,90 117486 Größe M 4,90 117485 Größe L 4,90	⑨ SCHWARZ 202153 Größe XS 4,90 202154 Größe S 4,90 202155 Größe M 4,90 202156 Größe L 4,90	⑬ GRAU 216079 Größe XS 4,90 216080 Größe S 4,90 216081 Größe M 4,90 216082 Größe L 4,90
② BLAU 117483 Größe XS 4,90 117482 Größe S 4,90 117481 Größe M 4,90 117480 Größe L 4,90	⑥ GRÜN 117521 Größe XS 4,90 117520 Größe S 4,90 117519 Größe M 4,90 117518 Größe L 4,90	⑩ DUNKELBLAU 216232 Größe XS 4,90 216233 Größe S 4,90 216234 Größe M 4,90 216235 Größe L 4,90	⑭ TÜRKIS 216075 Größe XS 4,90 216076 Größe S 4,90 216077 Größe M 4,90 216078 Größe L 4,90
③ ROSA 117499 Größe XS 4,90 117498 Größe S 4,90 117497 Größe M 4,90 117496 Größe L 4,90	⑦ CEDRO 216226 Größe XS 4,90 216227 Größe S 4,90 216228 Größe M 4,90 216229 Größe L 4,90	⑪ DUNKELLILA 216222 Größe XS 4,90 216223 Größe S 4,90 216224 Größe M 4,90 216225 Größe L 4,90	⑮ HELLBLAU 216370 Größe XS 4,90 216371 Größe S 4,90 216372 Größe M 4,90 216373 Größe L 4,90
④ MAGENTA 208481 Größe XS 4,90 208482 Größe S 4,90 208483 Größe M 4,90 208484 Größe L 4,90	⑧ ORANGE 117510 Größe XS 4,90 117509 Größe S 4,90 117508 Größe M 4,90 117507 Größe L 4,90	⑫ ROT 216083 Größe XS 4,90 216084 Größe S 4,90 216085 Größe M 4,90 216086 Größe L 4,90	⑯ WEINROT 216218 Größe XS 4,90 216219 Größe S 4,90 216220 Größe M 4,90 216221 Größe L 4,90





Packung 100 Stück

5,90



Packung 100 Stück

3,99

SMART NATURE GLOVES

biologisch abbaubarer
Untersuchungshandschuh aus Nitril
für den medizinischen Gebrauch

- Biologisch abbaubar
- Latexfrei für minimales Allergierisiko
- Komfortables Design für ergonomisches Arbeiten
- Exzellente Passform
- Polymerbeschichtet
- Einzigartige Formulierung
- Gemäß den Normen EN 455 sowie EN 374 PSA Kategorie III gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425
- Medizinprodukt der Klasse I
- AQL 1,5. Packung mit 100 Stück.

214418 Größe XS
214417 Größe S
214416 Größe M
214415 Größe L

5,90
5,90
5,90
5,90

SMART NITRILHANDSCHUHE PSA

Der smartdent Nitril ist ein super sensibler Handschuh und hat einen exzellenten Tragekomfort durch hervorragende Passform. Der smartdent Nitril ist extra dünn und gefühlsecht, weich, geschmeidig und leicht an- und auszuziehen. Die mikrotexturierten Fingerspitzen gewährleisten ein extra feines Tastempfinden und einen sicheren Halt. Hergestellt nach EN 455. EN 374. AQL 1,5.

110961 Größe XS
110962 Größe S
110963 Größe M
110964 Größe L

3,99
3,99
3,99
3,99



Packung 100 Stück

5,90



Packung 100 Stück

4,90

SMART LADY PEARL NITRILHANDSCHUHE

Die Nitrilhandschuhe smart Lady Pearl sind unsteril, puderfrei, latexfrei, haben mikrogeraute Fingerspitzen und sind beidseitig verwendbar. Mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455, EN 374, AQL 1,5. Farbe: Perlmutter rosa. Packung mit 100 Stück.

201138 Größe XS
201139 Größe S
201140 Größe M
201141 Größe L

5,90
5,90
5,90
5,90

SMART NITRILHANDSCHUHE SOFT PREMIUM

Die Nitrilhandschuhe Premium sind super sensitiv und haben, bedingt durch die sehr gute Passform, einen hervorragenden Tragekomfort. Zudem sind diese extra dünn dadurch gefühlsecht, weich, geschmeidig und leicht An- und Auszuziehen. Die mikrogerauten Fingerspitzen gewährleisten ein extra feines Tastempfinden und einen sicheren Halt. Hergestellt nach EN 455. EN 374. AQL 1,5.

207216 Größe XS
207217 Größe S
207218 Größe M
207219 Größe L

4,90
4,90
4,90
4,90



Packung 100 Stück

3,89



SMART NITRILHANDSCHUHE LIGHT

Der puderfreie Untersuchungshandschuh Nitril light ist extra dünn und ist dadurch besonders gefühlsecht. Der smart Nitril light ist super sensitiv und hat angeraute Fingerkuppen. Erfüllt die EN 455 und EN 374, AQL 1,5 Packung 100 Stück.

INDIGOBLAU

216031 Größe XS
216032 Größe S
216033 Größe M
216034 Größe L

3,89
3,89
3,89
3,89


WEISS

216027 Größe XS
216028 Größe S
216029 Größe M
216030 Größe L

3,89
3,89
3,89
3,89

Packung 100 Stück

4,85

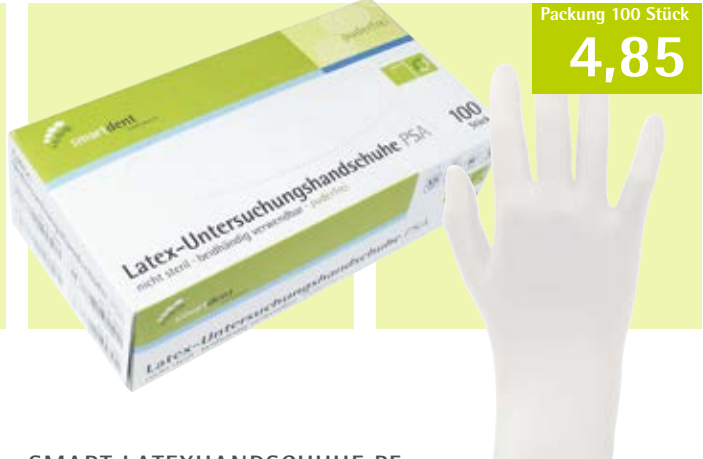

SMART LATEXHANDSCHUHE PF

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T 1-3. AQL 1,5. Hochwertige Polybeschichtung innen. Mit microgerauten Handflächen. Gewicht (Größe M) ca. 5 g. Packung mit 100 Stück.

110951 Größe XS
110952 Größe S
110953 Größe M
110954 Größe L

4,85
4,85
4,85
4,85

Packung 100 Stück

5,90



SMART LATEXHANDSCHUHE PREMIUM PF

Puderfreier, unsteriler Einmalhandschuh der Spitzenklasse. Rutschfeste Oberfläche, innen polymerbeschichtet, ideale Materialstärke, stabil mit hohem Tragekomfort. Gewicht (Größe M) ca. 6 g.

110955 Größe XS
110956 Größe S
110957 Größe M
110958 Größe L

5,90
5,90
5,90
5,90

Packung 100 Stück

4,80



SMART LATEXHANDSCHUHE POLYMER

Bei dem smartdent Polymer Latexuntersuchungshandschuh ist durch ein speziell entwickeltes Verfahren die synthetische Innenbeschichtung nicht lose aufgebracht, sondern direkt in das Latex-Material eingebunden. Das garantiert Ihnen ein einfaches und schnelles Anziehen des Handschuhs und zeichnet ihn überdies durch Hautfreundlichkeit aus. Die Oberfläche ist voll texturiert, dadurch ist eine

ganzflächige Griffigkeit gewährleistet. Ideal für den Einsatz in der Zahnarztpraxis. Packung 100 Stück.

124735 Größe XS
124736 Größe S
124737 Größe M
124738 Größe L

4,80
4,80
4,80
4,80



SMARTCERAM FLOW

smartCeram flow ist ein lichthärtendes, fließfähiges, hoch röntgensichtbares Komposit von hoher Viskosität der neuen Generation. Es gelten die Richtlinien und Vorgaben der DIN EN ISO 4049. Bis-GMA frei.

Indikationen:

- Fissurenversiegelung
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Füllungen der Klasse V nach Black (Zahnhalbkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)
- Minimalinvasive Füllungen der Klassen I, II und III nach Black
- Korrekturen von Zahnschmelzdefekten
- Ausblocken von Unterschnitten
- Kleinere Form- und Farbkorrekturen am Schmelz

Röntgenopazität: 210 % AL

Durchhärtetiefe: max. 2 mm

Vickers Härte 794

Lichtintensität für die Aushärtung 650 mW/cm²

Wellenlänge für die Aushärtung 350 – 500 nm
Aushärtezeit 40 sec.

211501	Packung Spritze 2 x 2 g A1	18,50
211502	Packung Spritze 2 x 2 g A2	18,50
211503	Packung Spritze 2 x 2 g A3	18,50
211504	Packung Spritze 2 x 2 g A3,5	18,50
211505	Packung Spritze 2 x 2 g B1	18,50
211506	Packung Spritze 2 x 2 g Bleach	18,50
211507	Single Dose Packung 15 x 0,25 g A1	45,90
211508	Single Dose Packung 15 x 0,25 g A2	45,90
211509	Single Dose Packung 15 x 0,25 g A3	45,90
211510	Single Dose Packung 15 x 0,25 g A3,5	45,90
211511	Single Dose Packung 15 x 0,25 g B1	45,90
211512	Single Dose Packung 15 x 0,25 g Bleach	45,90



SMARTCERAM

smartCeram ist ein lichthärtendes, hochglanzpolierbares Hybrid Komposit mit einem ultrafeinen, röntgenopaken Glasfüllstoff für die adhäsive Füllungstherapie. Aufgrund des ultrafeinen Füllstoffes lassen sich außerordentlich homogene und hochglanzpolierbare Restaurationen herstellen, die durch einen gezielt eingestellten Chamäleoneneffekt eine optimale Farbanpassung der Füllung ermöglichen (Transparenz > 4-5 %). Es gelten die Richtlinien und Vorgaben der DIN EN ISO 4049.

Indikationen:

- Front- und Seitenzahnrestaurationen der Klassen I, II, III, IV und V nach Black
- Inlays, Onlays und Veneers
- Erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren
- Stumpfaufbauten
- Schienung von gelockerten Zähnen
- Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik

Röntgenopazität: 210 % AL

Durchhärtetiefe: max. 2 mm

Vickers Härte 784

Transparenz > 4-5 %

Lichtintensität für die Aushärtung 650 mW/cm²

Wellenlänge für die Aushärtung 350 – 500 nm
Aushärtezeit 40 sec.

211482	Spritze 3 g A1	12,90
211483	Spritze 3 g A2	12,90
211484	Spritze 3 g A3	12,90
211485	Spritze 3 g A3,5	12,90
211486	Spritze 3 g B1	12,90
211487	Spritze 3 g B2	12,90
211488	Spritze 3 g C3	12,90
211489	Spritze 3 g Bleach	12,90
211492	Single Dose Packung 20 x 0,3 g A1	30,90
211493	Single Dose Packung 20 x 0,3 g A2	30,90
211494	Single Dose Packung 20 x 0,3 g A3	30,90
211495	Single Dose Packung 20 x 0,3 g A3,5	30,90
211496	Single Dose Packung 20 x 0,3 g B1	30,90
211497	Single Dose Packung 20 x 0,3 g B2	30,90
211498	Single Dose Packung 20 x 0,3 g C3	30,90
211499	Single Dose Packung 20 x 0,3 g Bleach	30,90





SMARTCITE ALL' N' ONE

smartCite All'N'One ist ein selbst-ätzendes, lichthärtendes Einkomponenten Bonding für die sichere und zuverlässige Befestigung von Füllungskompositen auf natürlichen Zahnhartsubstanzen. Das Adhäsiv kann im Self Etch Verfahren oder im Selective Etch Verfahren angewendet werden. smartCite All'N'One ist kompatibel mit allen gängigen lichthärtenden Kompositmaterialien.

211517 Flasche 5 ml

29,50

Indikationen:

- Direkte, lichthärtende Kompositrestaurationen auf dem natürlichen Zahn
- Indirekte Restaurationen aus Komposit und Keramik (Inlays, Onlays, Veneers, Kronen) mit licht- und dualhärtenden Befestigungskompositen z. B. mit Root Cem Viscous
- Reparatur frakturierter Kompositfüllungen



SMART
EINWEGPINSEL
finden Sie auf
Seite
19



SMARTIC ARTIKULATIONSPIER

Das smartCite Artikulationspapier dient dazu okklusale Kontakte und die Verteilung okklusaler Kräfte hervorzuheben. Es wird routinemäßig zur Überprüfung der Kauflächen neu eingesetzter Zahnrestaurationen (z. B. Füllungen oder Kronen) und Zahnersatz (z. B. Zahnprothesen oder Brücken) eingesetzt. Es wird auch verwendet um okklusale Interferenzen hervorzuheben, z. B. bei Personen mit Bruxismus.

215717 Dose 300 Stück 200µ

8,50

219269 Refill 300 Stück 200µ,

7,90



Packung 50 Stück
39,95



SMART LÖFFELMATERIAL

smart Löffelmaterial ist ein licht-härtendes Löffelmaterial in Form von vorgefertigten Basisplatten, zur Herstellung von verwindungssteifen individuellen Abformlöffeln, Biss-schablonen, als Basis für Prothesen-aufstellungen, Schlüssel zur Stutzstiftregistrierung sowie für Kontrollbisse für Gerüstanproben. smart Löffelmaterial kann in allen UV- und Halogen-Lichtgeräten ausgehärtet werden (UV-Licht: 200nm – 400nm oder Halogen-Licht: 450 – 520nm, 3 – 5 Minuten von beiden Seiten)

Die Basisplatten werden in einer wieder verwendbaren Lichtschutz-dose geliefert, die als Container zum Transport oder zur Lagerung von Modellen, etc. einsetzbar ist. Biege-festigkeit mind. 130 N/mm². Dicke 2,1 – 2,4 mm. Nicht röntgensichtbar. Die Bissfestigkeit (Druckfestigkeit) liegt über 500 MPA.

214667 Packung
50 Platten, rosa **39,95**



SMART OKKLUSIONSSPRAY

Mikropulverisiertes Markierungsspray zur Sichtbarmachung von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich. Der Farbpigmentfilm ist mit Wasser rückstandsfrei und leicht zu entfernen. Erhältlich in den Farben grün und rot.

130626 Dose 75 ml grün **5,50**
130627 Dose 75 ml rot **5,50**






SMART COOL PACK EASY

Einweg-Kältekompresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung.

202173 Stück

0,59

Stück
0,59

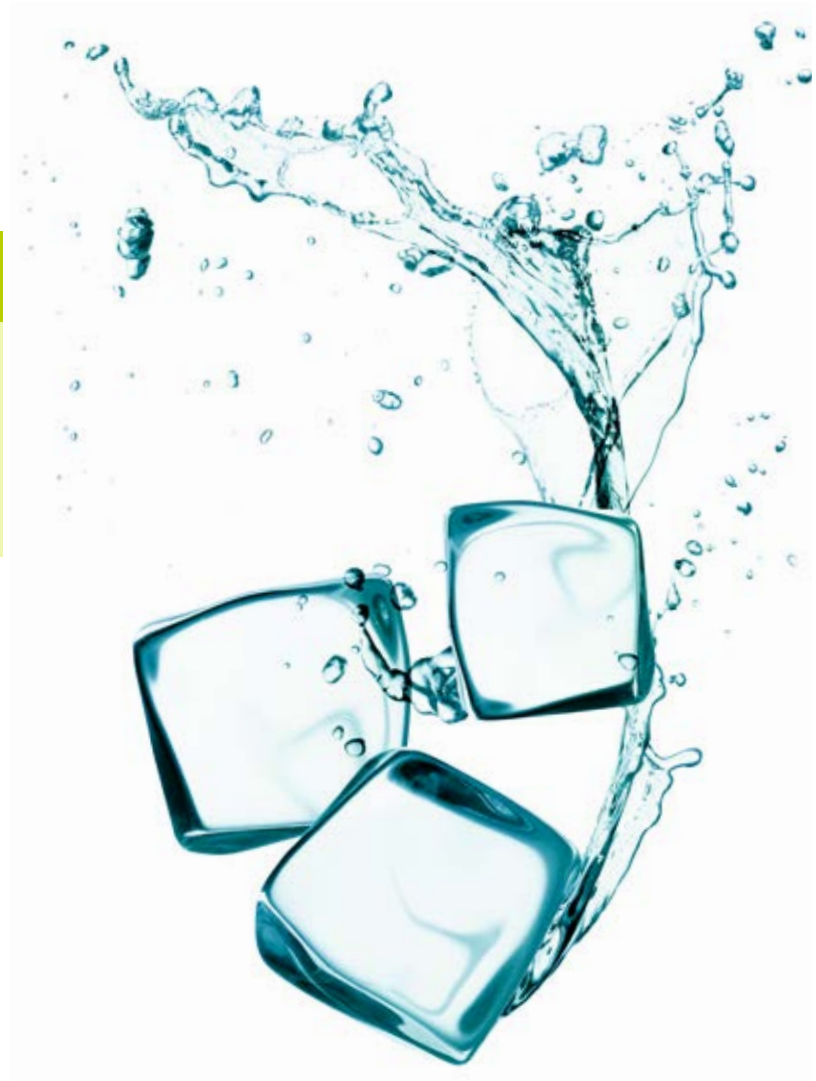

SMART KÄLTESPRAY

Das smart Kältespray eignet sich zum schnellen Vereisen von Schaumstoffpellets oder Watte. Mit den vereisten Pellets oder Watte pads kann die Vitalitätsprüfung von Zähnen getestet werden. Auch zum Kühlen von Abdruck-/Gussmaterialien wie z.B. Hydrokolloiden etc.

111363 Dose 200 ml Pfefferminz	2,43
130625 Dose 200 ml Orange	2,43
218185 Dose 200 ml Cola	2,59
218184 Dose 200 ml Bubble Gum	2,59

Dose 200 ml ab
2,43





SMART INJEKTIONSKANÜLEN

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff, silikonüberzogen für einen schmerzarmen Einstich. Versiegelt und steril verpackt.

111206	0,3 x 13 mm, Packung 100 Stück	10,95
111205	0,3 x 23 mm, Packung 100 Stück	10,95
111204	0,4 x 23 mm, Packung 100 Stück	10,95
111203	0,4 x 42 mm, Packung 100 Stück	10,95



SMART ZYLINDERAMPULLENSPRITZE

Die smart Zylinderampullenspritze aus rostfreiem Edelstahl ist geeignet für eine passive und aktive Aspiration, passend für 1.8 ml Ampullen. Die Ampulle kann einfach und schnell seitlich beladen werden. Durch die Pfeilspitze erfolgt eine sichere Arretierung im Lochstopfen. Die smart Zylinderampullenspritze bietet durch die optimierte Fingerauflage einen sicheren Halt. Geeignet für Thermodesinfektion und Autoklaven.

201142	Stück	54,90
--------	-------	-------





Packung 12 Stück ab

11,90



SMART MUNDSPIEGEL

Mundspiegel Standard: Mit Silber Titan-Beschichtung für lange Haltbarkeit. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar.

Mundspiegel Rhodium: Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildwiedergabe durch Oberflächen-Versiegelung, da die Reflexion/Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Reinigungslösungen.

111367	Standard Nr.4, plan Packung 12 Stück	11,90
111368	Standard Nr.5, plan Packung 12 Stück	11,90
111552	Rhodium Nr.4, plan Packung 12 Stück	18,90
111553	Rhodium Nr.5, plan Packung 12 Stück	18,90

SMART MUNDSPIEGELGRIFF

Mundspiegelgriff Edelstahl:
geriefte Grifffläche

Mundspiegelgriff Ergo:
Edelstahl, ergonomische Grifffläche

111366	Edelstahl, geriefte Grifffläche, Stück	2,89
111554	Edelstahl, ergonomische Grifffläche, Stück	2,29



SMART ENDODONTIE-INSTRUMENTE

Hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente "Made by Sendoline". Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchsicherheit. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen. Der Griff ist durch die ergonomische Grippfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem Silikonstopper ausgestattet sind. Es handelt sich um ein Einmalprodukt, das vor dem Einsatz der Sterilisation (bis max. 136° C) bedarf.

SMART HEDSTRÖMFEILEN

124153	008, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124551	035, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124154	008, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124552	035, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124155	008, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124553	035, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124156	010, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124554	040, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124157	010, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124555	040, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124158	010, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124556	040, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124159	015, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124557	045, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124160	015, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124558	045, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124161	015, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124559	045, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124162	020, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124786	050, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124163	020, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124787	050, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124164	020, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124566	050, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124165	025, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124788	15-40, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124166	025, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124789	15-40, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124167	025, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124790	15-40, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124168	030, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124791	45-80, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124169	030, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124792	45-80, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124505	030, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124793	45-80, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49





SMART K-FEILEN

124860	006, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124854	045, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124861	006, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124855	045, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124862	006, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124856	045, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124863	008, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124857	050, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124864	008, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124858	050, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124865	008, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124859	050, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124833	010, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124866	15-40, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124834	010, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124867	15-40, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124835	010, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124868	15-40, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124836	015, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124869	45-80, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124837	015, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124870	45-80, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124838	015, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124871	45-80, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124839	020, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124840	020, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124841	020, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124842	025, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124843	025, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124844	025, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124845	030, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124846	030, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124847	030, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124848	035, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124849	035, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124850	035, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124851	040, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124852	040, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49			
124853	040, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49			

SMART K-BOHRER

124821	006, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124806	030, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124822	006, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124807	030, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124823	006, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124808	030, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124824	008, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124809	035, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124825	008, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124810	035, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124826	008, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124811	035, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124794	010, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124812	040, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124795	010, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124813	040, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124796	010, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124814	040, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124797	015, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124815	045, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124798	015, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124816	045, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124799	015, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124817	045, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124800	020, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124818	050, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124801	020, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124819	050, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124802	020, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124820	050, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
124803	025, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49	124827	15-40, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
124804	025, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49	124828	15-40, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
124805	025, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49	124829	15-40, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49
			124830	45-80, 21 mm, Packung 6 Stück	4,49
			124831	45-80, 25 mm, Packung 6 Stück	4,49
			124832	45-80, 31 mm, Packung 6 Stück	4,49





SMART ORASPLASH

smart orasplash ist eine antibakterielle Mundspüllösung für den täglichen Gebrauch.

Eigenschaften:

- Stärkt den Zahnschmelz
- Bekämpft bakteriellen Plaque und Mundgeruch
- Schützt vor Bakterien, die die Karies verursachen
- Beugt Parodontitis vor
- Kräftigt das Zahnfleisch
- Vermindert die Neubildung von Zahnbelag
- Extra frischer Atem
- Enthält kein Mikroplastik und keinen Alkohol
- In den Varianten Mint und Spearmint erhältlich

214674 mint, violett	
Flasche 50 ml	1,59
214675 mint, violett	
Flasche 900 ml	5,60
214672 spearmint, hellgrün	
Flasche 50 ml	1,59
214673 spearmint, hellgrün	
Flasche 900 ml	5,60

Flasche 50 ml
1,59



Flasche 50 ml
1,59



Flasche 900 ml
5,60





SMART COCOSFRESH ERFRISCHUNGSTUCH

Erfrischungstuch aus zartem Vlies mit dem Duft nach Sommer und Sonne- coconut.
Tuchformat ca. 185 x 190 mm.

202867 Stück

0,34



Stück
0,34



SMART NATURE BRUSH

Ökologische Zahnbürste mit Bambus-Griff.

- Beschichtet mit Bienenwachs
- Borsten aus Rizinusöl
- Nachhaltig und ökologisch durch nachwachsende Rohstoffe

In 2 Formen bestellbar:

- Ergo - mit ergonomisch geformtem Griff
- Basic - mit rundem Griff

215342 basic, Stück

1,59

215341 ergo, Stück

1,59



Stück
1,59



Stück
1,59





SMART MINIBRUSH

Die smart Minibrush mit Nylonborsten sind Prophylaxebürsten für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Mit Winkelstückschacht. Maximale Umdrehung 2.500 Upm.

214831 Packung 100 Stück **29,90**

Packung 100 Stück

29,90



SMART PROFIPOLISH POLIERPASTE

smart profipolish ist eine Prophylaxepaste für die Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen. smart profipolish hat einen Natriumfluoridanteil von 0,2 %, ist gluten-, laktose- und phthalatfrei, RDA 40. Farbe gelb.

219276 bubble gum, Tube 95g **5,90**

219277 cola, Tube 95g **5,90**



SMARTPEARLS PLUS

smartPearls Plus ist ein Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- als auch supragingivalen Zahnreinigung. smartPearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Das Pulver hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, ist damit angenehm speziell auch für kleine Patienten und löst sich rückstandslos im Mund des Patienten auf. Die smartpearls haben eine Körngröße von 15µm.

200941 Flasche 120 g **14,90**



Flasche 120 g

14,90



SMARTPEARLS

smartPearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten. Das Pulver hat eine Korngröße 40-50 µm. Die smartPearls gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.

200939 Flasche 300 g	cassis	13,90
200938 Flasche 300 g	cherry	13,90
200937 Flasche 300 g	lemon	13,90
200940 Flasche 300 g	mint	13,90



Flasche 300 g
13,90



SMARTGUN PERIO

Die smartgun Perio findet Anwendung in parodontalen Taschen und bei der Behandlung von Periimplantitis. Die Vermeidung von Verletzungen des Weichgewebes und der Wurzeloberfläche in den parodontalen Taschen während der Reinigung hat entscheidende Bedeutung. Das ultrafeine Wasserspray und das tagatosebasierte Pulver, wie z.B. smartpearls plus, bilden eine unschlagbare Kombination, mit deren Hilfe subgingivaler Biofilm in nur 20 Sekunden pro Zahn beseitigt werden kann. Die Kombination aus der schlanken smartgun Perio Düse mit einer dünnen, flexiblen Plastikspitze macht die subgingivale Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch eine außerordentliche Sicht und überragendes Handling. Denn die Form der Düsen Spitze ist äußerst anwenderfreundlich und ermöglicht einfachen Zugang in die Zahnfleischtaschen sowie angenehme Behandlungen.

122810 KaVo Set **699,00**
122812 Sirona Set **699,00**

201244 für KaVo inkl.
4 x 120 g smartpearls plus
Set **719,00**

201422 für Sirona inkl.
4 x 120 g smartpearls plus
Set **719,00**





SMARTGUN ONE

Durch hervorragende Gewichtsbalance und eine leichte, kompakte Pulverkammer ist die smartgun One bequem zu halten, während sich die Handstückkupplung selbst bei hohem Luftdruck frei um 360° drehen lässt. Die mühelose, unkomplizierte Inbetriebnahme verkürzt den Zeitaufwand für die Entfernung von Plaque und Verfärbungen. Düsen mit einer Abwinklung von 60° und 80° sind im Paket enthalten. Mit der Doppeldüse wird eine höhere Polierleistung erreicht. Durch den leistungsstarken Pulverstrahl wird die Reinigungszeit und damit die Behandlungszeit deutlich verkürzt. Mit der smartgun One haben sie ein absolut robustes und zuverlässiges Zahnpoliersystem. Die Eigenschaften im Überblick:

- Pulverstrahlgerät für die professionelle Zahnreinigung
- Leichte und flexible Konstruktion
- Vorderteil (Handstück) um 360° drehbar
- Einfach zu reinigen
- Erhältlich für Turbinenkupplungen von KaVo und Sirona

122809 KaVo Set **630,00**
122811 Sirona Set **630,00**

201243 für KaVo inkl. 4 x 300 g
smartpearls sortiert
Set **649,00**

201421 für Sirona inkl. 4 x 300 g
smartpearls sortiert
Set **649,00**





SMARTCASE SCHIENENDOSEN

Die smartCase Schienendosen dienen zur sicheren Aufbewahrung sowie zum Transport von Zahnsparungen und Schienen (Okklusionsschienen, Aligner) und sind aus 100%igem recyceltem Material hergestellt. Die gelochte Ober- als auch Unterschale dienen der Belüftung für eine hygienische Trocknung.

Maße: ca. 30 x 73 x 78 mm (H x B x T).

219258 Packung 10 Dosen, black	6,70
219251 Packung 10 Dosen, blue	6,70
219252 Packung 10 Dosen, green	6,70
219259 Packung 10 Dosen, grey	6,70
219256 Packung 10 Dosen, orange	6,70
219255 Packung 10 Dosen, pink	6,70
219254 Packung 10 Dosen, purple	6,70
219253 Packung 10 Dosen, red	6,70
219250 Packung 10 Dosen, white	6,70
219257 Packung 10 Dosen, yellow	6,70

SMARTCASE KFO-BOXEN

Zur sicheren Aufbewahrung und Transport von kieferorthopädischen Apparaturen wie z.B. einzelnen Schienen und herausnehmbaren Platten etc. Die smartCase KFO-Boxen sind aus 100%igem recyceltem Material hergestellt. Die gelochte Ober- als auch Unterschale dienen der Belüftung für eine hygienische Trocknung.

Maße: ca. 45 x 60 x 95 mm (H x B x T).

219264 Packung 10 Boxen, klein, blue	6,70
219265 Packung 10 Boxen, klein, green	6,70
219266 Packung 10 Boxen, klein, pink	6,70
219267 Packung 10 Boxen, klein, purple	6,70



Jetzt gibt's „gut und clever“
auch „schnell und direkt“:

clever web



smartdent.
Einfach. Online.



*Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen
des jeweils die Bestellung annehmenden
Dental-Union Fachhandelspartner. Mit
Erscheinen dieses Katalogs verlieren bisherige
smartdent Kataloge ihre Gültigkeit. Produkt-
änderungen, Abweichungen von Farben oder
Designs sowie Irrtum bei Beschreibungen
behalten wir uns vor.*

